




硬质框架 PCR板

过硬的PCR质量之选



BRAND. For lab. For life.®

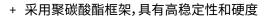

- + 超薄孔壁有利于快速传递热量
- + 适用于各类标准PCR/qPCR仪且兼容自动化





硬质框架 PCR板 96孔和384孔

对于中高通量的样品,BRAND的96孔板和384孔板是PCR和qPCR的高效解决方案。我们的硬质框架PCR板采用高强度的聚碳酸酯框架,确保在半自动和全自动移液系统中安全使用,并提供更好的蒸发保护。除了硬质框架以外,BRAND还采用100%纯医用级聚丙烯制成的超薄壁PCR孔。孔壁薄而均匀,确保温度从PCR/qPCR仪到样品的快速传递,从而缩短循环时间

为了保证高效的热传递,BRAND提供了多种不同的裙边 (skirt)选择以适应常见的PCR/qPCR仪。可以在半裙边(semiskirted)和全裙边(fully-skirted)板之间选择。使用不同颜色的 PCR板可以帮助区分不同的实验步骤。对于荧光定量PCR实验(qPCR),可以选择白色孔的PCR板,以更好地反射荧光信号。BRAND所提供的PCR耗材具有洁净室级别的质量等级,能够保证实验结果的可靠性。我们生产的96孔和384孔硬质框架PCR板也是在受控的洁净室条件下生产的,因此符合BIO-CERT®PCR质量等级的纯度标准。





- + 适用于中高通量的样本
- + 具有高稳定性的聚碳酸酯框架
- + 快速传热的超薄孔壁设计
- + 适用于大部分常见的PCR/qPCR仪且兼容自动化
- +可选适用于qPCR的白色板



适用于中高通量的样本



具有高稳定性的聚碳酸酯框架 适用于半自动和全自动移液系 统



超薄孔壁,缩短循环时间



更多PCR产品,如单管、8连管、 96孔和384孔板,可以在 shop.brand.com.cn找到

订购信息



96孔PCR板,硬质框架,全裙边 PC/PP, BIO-CERT® PCR 质量等级



框架颜色	容积 ml	孔的颜色	切角	包装规格	样品 ¹⁾ 货号	货号
磨砂	0,15	透明	H1	1包=50块	781453	781541
金色	0,15	透明	H1	1包=50块	-	781542
红色	0,15	透明	H1	1包=50块	781443	781543
绿色	0,15	透明	H1	1包=50块	-	781544
蓝色	0,15	透明	H1	1包=50块	-	781545
白色	0,15	白色	H1	1包=50块	781457	781546

¹⁾¹块



96孔PCR板,硬质框架,半裙边 PC/PP, BIO-CERT® PCR 质量等级



框架颜色	容积 ml	孔的颜色	切角	包装规格	样品 ¹⁾ 货号	货号
透明	0,2	透明	A12	1包=50块	781447	781547
蓝色	0,2	透明	A12	1包=50块	781448	781548
透明 2)	0,15	白色	H12	1包=50块	781449	781549

¹⁾ 1块 ²⁾ 适用于 Roche® Lightcycler®



384孔PCR板,硬质框架,全裙边 PC/PP, BIO-CERT® PCR 质量等级



框架颜色	容积 ml	孔的颜色	切角	包装规格	样品 ¹⁾ 货号	货号
磨砂	0,03	透明	A24	1包=50块	781438	781538
磨砂3)	0,03	白色	P24, A24	1包=50块	781439	781539

¹⁾ 1块 ³⁾ 适用于 Roche® Lightcycler®, BioRad



封板膜

描述	材质	应用领域	工作温度	包装规格	货号
封板膜	聚酯	PCR	-40 to 120 °C	100张	781391



更多封板膜产品

可以在shop.brand.com.cn找到

BRAND. For lab. For life.®



BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.® 以及这里出现的数字商标,和 BRAND数字商标都为注册商标或者 BRAND GMBH + CO KG, Germany 的注册商标。所有这里提及或出现的商标都为各自所有者的财产。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然,许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果,在实际应用时可能由于各种的因素而超出我们的控制范围。因此,请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的责任。使用者有责任确定产品是否符合所进行的特定应用。

可能包含错误。



在 shop.brand.com.cn 您可以找到附件,配件,用户手册,测试指南(SOP)以及产品视频



更多资讯,请关注我们的官方微信号:德国BRAND



更多有关质量等级的信息可以在www.brand.com.cn找到

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd. Shanghai, China

T +86 21 6422 2318 info@brand.com.cn china.brand.com.cn